


Mascherina in tessuto 100% polipropilene, a 2 veli. Stampate con inchiostro ecologico a base d'acqua. Confortevoli, massima aderenza facciale, antigoccia, traspiranti e lavabili a mano o in lavatrice a 60°C.

È possibile personalizzare questo prodotto, stampando sui tessuti: loghi aziendali, grafiche, pattern e immagini.

Per bambini da 7 a 13 anni.

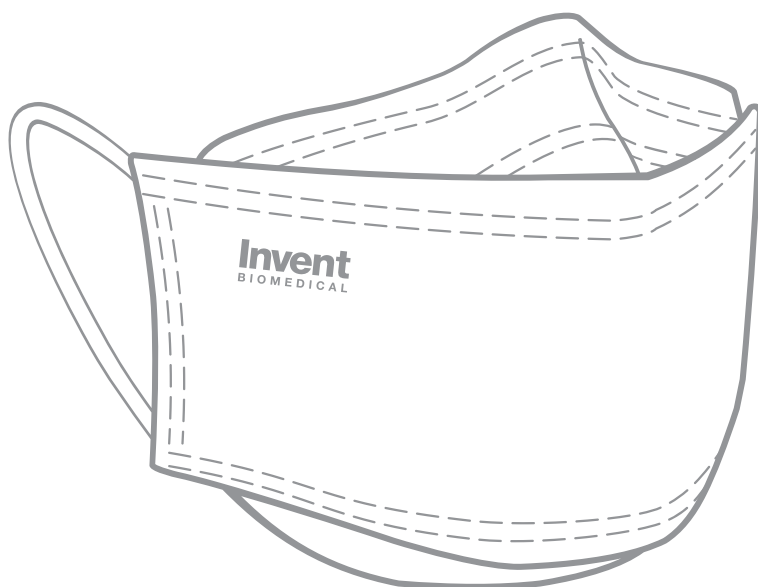

LAVABILE
A 60°



RIUTILIZZABILE
20 VOLTE



ANTIGOCCIA



TRASPIRANTE



INCHIOSTRI
BASE ACQUA



MADE IN ITALY



CONFEZIONATE
SINGOLARMENTE



TRATTAMENTO
ANTIBATTERICO



ADATTE ANCHE
AI BAMBINI



TESSUTO

Composizione	Peso gr/mq	Colore	Membrana
NONTESSUTO SPUNBONDED	60 gr	Turchese	Tessuto Non Tessuto in Polipropilene granulato
MELTBLOWN / SMS40	40 gr	Bianco	Filtro in Polipropilene

CUCITURE

Ultrasuoni

CERTIFICAZIONI

Test eseguiti:

- Efficienza di filtrazione batterica (BFE)% (UNI EN 14683) \geq **98%**

Certificazione del fornitore sul tessuto filtrante (Meltblown/SMS40):

- **Oeko-Tex Standard 100 : Class I**

Qualifica:

- **Maschera ad uso medico di Tipo II**

INDICAZIONI PER L'USO

Il dispositivo è multiuso.

È possibile lavare tutte le mascherine a mano o in lavatrice a 60°C senza ammorbidente e senza centrifuga. Non devono essere stirate in nessun caso e non vanno messe in asciugatrice.

Possano essere lavate fino a 20 volte.

CONFEZIONAMENTO E IMBALLO

Le mascherine Invent possono essere confezionate anche singolarmente con modalità termoretraibile. Le singole confezioni vengono poi inserite in scatole da 50 pezzi. Possibilità di imballo multiplo, pacco da 8 confezioni per un totale di 400 pezzi.

STOCCAGGIO

Conservare a temperatura non superiore a 25°C e umidità relativa massima dell'80%, al riparo da fonti di luce diretta. Non conservare per più di 1 mese a condizioni medie superiori a quanto indicato.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il Prodotto è **provisto di marchio CE** e listato sul sito del ministero della salute (www.salute.gov.it).



Invent è da sempre un'azienda sensibile alle tematiche ambientali e pone qualità, sostenibilità e eco-compatibilità tra gli elementi cardine dell'azienda. Impegnata da moltissimi anni nel settore delle energie rinnovabili, e ora anche in questo nuovo settore il nostro impegno è finalizzato alla continua ricerca di soluzioni innovative in un'ottica di diminuzione progressiva della produzione di rifiuti plastici dannosi per l'ambiente. È per questo che Invent ha deciso di realizzare mascherine lavabili e riutilizzabili più volte.

Invent[®]
B I O M E D I C A L